

Pełna higiena – poczynając od stanowiska roboczego po osprzęt



Osprzęt – przegląd produktów



Perfekcyjna higiena od A-Z – dzięki MEIKO



MEIKO – „czyste” rozwiązanie. Kompletna paleta osprzętu stanowiąca uzupełnienie oferty myjni dezynfektorów. Składają się na nią zarówno różnego koloru materiały, z których wykonane są powierzchnie lub blaty robocze, sprzętu tego typu, jak i szafki oraz regały a również systemy uchwytów oraz urządzenia i programy elektronicznej komunikacji i nadzoru perfekcyjna higiena od A-Z.

Stanowisko robocze – różnorodne i higienicznie



Zarówno pojedyncze urządzenie, jak i kompletnie urządzone brudowniki. Indywidualne i elastyczne rozwiązania: blaty robocze, umywalki, szafki, regały i wiele innych detali. Wszystko, co zwiększa bezpieczeństwo, komfort i higienę pracy, a do tego jest wykonane z najwyższej jakości stali szlachetnej, gwarantowanej przez firmę MEIKO.

Łatwe w pielęgnacji i o przyjemnej kolorystyce: płyty laminowane HPL lub CORIAN*



A gdyby zachciało się czegoś nietypowego: polecamy laminaty HPL (High Pressure Laminate) na bazie wosków utwardzanych termicznie, wzmacniane włóknami celulozy. Posiadają one charakterystyczną dekoracyjną strukturę powierzchni. Możliwe jest zamówienie innych kolorów lub wzorów – na życzenie i za dodatkową opłatą. Wyniki badań wskazują, że harmonijny dobór kolorów ma pozytywny wpływ na atmosferę pracy. Dlatego i nasze zestawy urządzeń sanitarnych można zamówić w różnych kolorach.

Wzory kolorów HPL

Żółty melonowy E2-31	Pastelowo-zielony E23-21
Koloru kości słoniowej E1-01	Błękitny E17-30
Piaskowy E3-0	

Wyciąg dostępnych kolorów



CORIAN* jest mineralnym materiałem, przeznaczonym do produkcji blatów roboczych. Jest wytrzymały i higieniczny, a także łatwy w pielęgnacji. Górne i dolne korpusy szafek mogą zostać dostarczone we wszystkich odcieniach RAL, matowe, błyszczące lub lakierowane natryskowo.

Wzory kolorów CORIAN

Waniliowy	Szary w odcieniu mojavie
Rafia	Dusk

Wyciąg dostępnych kolorów

Osprzęt do urządzeń MEIKO:
dobry wybór dla każdego



Dobry wybór dla każdego – korzystając z osprzętu do urządzeń MEIKO jest się przygotowanym na każdą ewentualność. Dla każdego rodzaju naczyń szpitalnego można znaleźć coś odpowiedniego: czy to uchwyt uniwersalny, czy uchwyty specjalne dla specjalistycznych naczyń. A wzornictwo perfekcyjnie dopasowane do rodzaju zastosowania umożliwia nie tylko wygodną obsługę i komfort pracy, ale gwarantuje też funkcjonalność, bezpieczeństwo i higienę pracy.




Drzwi komory myjącej z bocznymi zaślepkami, do użytku jako zlew
Splukiwanie zimną wodą, sterowane przez układ pomp myjni-dezynfektora.



Uchwyt uniwersalny SUH2



Uchwyty specjalne
Do mycia wstępnego butelek odsysających wraz z nakrętką. Usuwanie nieczystości odbywa się za zamkniętymi, szczelnymi drzwiami.

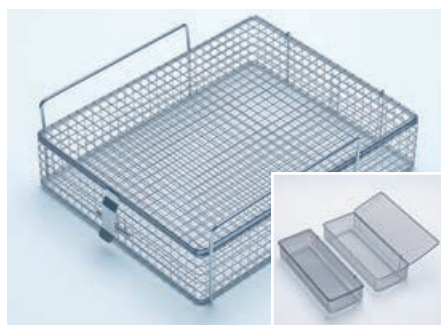


Koszyk na drobne elementy
Z zamykaną pokrywą, wsuwany do uchwytu na naczynia (wielkość oczek 10 x 10 mm).

Pojemnik (kosz) na drobne narzędzia i akcesoria szpitalne
Z zamykaną pokrywą, wkładany do koszyka na drobne elementy (wielkość oczek 4 x 4 mm).

Urządzenia elektronicznej komunikacji nadzoru MEIKO: gwarantują bezpieczeństwo i higienę



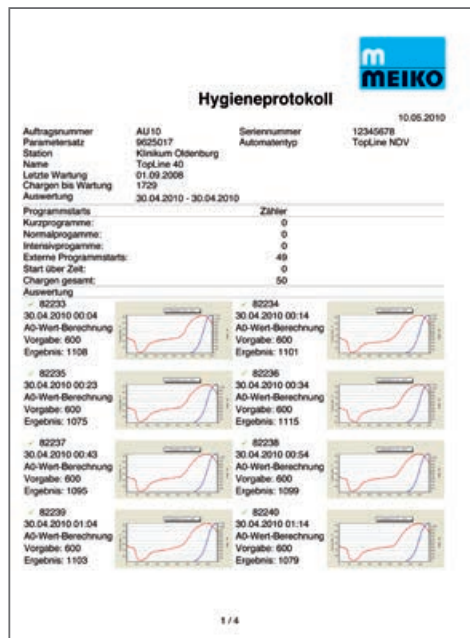

Kompleksowa kontrola: *M-Commander InVision*

Oprogramowanie analityczne *M-Commander InVision* firmy MEIKO zapewnia kompleksowy nadzór – higiena, logistyka i technologia pod pełną kontrolą. W przeciągu paru sekund i w przejrzysty sposób wszystkie potrzebne dane przesyłane są do komputera. Gwarantuje przejrzystość i bezpieczeństwo. System jest kompatybilny z myjniemi-dezynfektorami firmy MEIKO z elektronicznym sterownikiem *MIKE 2*.


- osiągnięta wartość A_0
- ustawiona wartość A_0
- Data i godzina startu programu
- Czas trwania cyklu
- Nr ident. maszyny
- Licznik załadowania
- Nr programu
- Przebieg temperatury w fazie dezynfekcji
- Nadzór online także z odległości
- Parametry urządzenia
- i wiele innych funkcji

Nadzór dezynfekcji online przez logger danych temperatury nadawanych przez fale radiowe

Możliwość kontroli online procesu dezynfekcji dokonywanej przez myjnię-dezynfektor – wystarczy zlecić firmie MEIKO umieszczenie w myjni loggera danych temperatury nadawanych przez fale radiowe. Pełna kontrola szybko i niezawodnie, zgodnie z normą EN ISO 15883. Gwarancja bezpieczeństwa i higieny.

- dane z przebiegu procesu do dyspozycji na laptopie
- dane kontrolowane są w przeciągu paru sekund przez serwer MEIKO za pośrednictwem LAN lub fali radiowych
- jeżeli dane są prawidłowe, automatycznie wystawiany jest certyfikat kontroli
- po otrzymaniu należy go dołączyć do dokumentacji i zachować w charakterze dowodu na wypadek kontroli przez odpowiedni organ nadzorczy
- w razie uzyskania nieprawidłowych danych odpowiedzialny serwis techniczny może niezwłocznie podjąć odpowiednie kroki
- Dalsze użytkowanie zostanie uniemożliwione użytkownik posiada stały dostęp do informacji dotyczących urządzenia oraz danych pomiarowych
- w ramach regularnej konserwacji przesyłane są odpowiednie dane do paszportu urządzenia

„Czyste” rozwiązanie: poczynając od pokrywy,
a kończąc na orurowaniu dopływowym

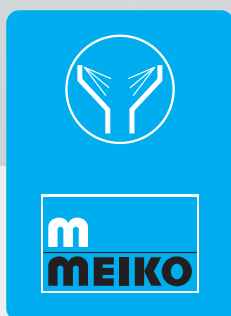

Zaślepka do zlewu

Z tyłu i/lub z boku. Automatyczne płukanie (opcja) przez myjnie-dezynfektor lub samozasilanie. Obsługa automatycznego płukania zlewu odbywa się za pomocą oddzielnej klawiatury (samozasilanie) lub przez sterownik urządzenia.



Osłona blaszana z z uchwytem zamkniętym

Pozwala na uniknięcie zapachu chemikaliów. Do umywalki wkładany 500 mm x 400 mm x 300 mm.



Jednouchwytowa bateria, chromowana, z obracaną wylewką, gwarantuje wygodną obsługę.



Dźwigniowy zawór odpływowy

Umywalki w wielkości od 500 mm x 400 mm x 300 mm, opcja ze znacznikiem napełnienia.



Środki czyszczące i pielęgnacyjne: Specjalny środek do odkamieniania i nabłyszczania DOYEN SK 22 E, do wyboru o zapachu jabłek

Uniemożliwia odkładanie się kamienia i powoduje bezplamowe samonabłyszczanie się naczyń. Na dłuższą metę gwarantuje lepsze rezultaty czyszczenia i dezynfekcji. (Opakowanie 5-kg)

Środek do mycia basenów DOYEN R 100

Alkaliczny, czyści efektywnie nawet silne zabrudzenia, nie uszkadzając przy tym struktury materiału. (Opakowanie 5-kg)

Środek do mycia basenów DOYEN RS 120

Zawiera kwas, odczyszczając maści, kremy i inne tłuszcze, uniwersalny w zastosowaniu, niezależnie od twardości wody. (Opakowanie 5-kg)



Centralnie prowadzone wylotowe przewody rurowe

Centralne podłączenie pod zlewem.



Przewody rurowe doprowadzające wodę do baterii mieszalnikowych

Centralne przyłącze łącznie ze ścianką instalacyjną dla wody zimnej i ciepłej.



Blat stołu ze stali szlachetnej z różnymi profilami

np. z prostą krawędzią wewnętrzną od strony ściany lub ze skośną krawędzią wewnętrzną od strony ściany o promieniu zapewniającym utrzymanie higieny w narożnikach (R15).

Szafy i regały: zapewniają czysty i higieniczny wygląd brudownika



Szafy

np. szafka z umywalką do rąk, dwojgiem drzwi i czterema szufladami.
Do nabycia w różnych wymiarach.



Regał TUS

Na zdezynfekowane kaczki szpitalne, baseny i pojemniki z dodatkową ażurową półką lub okapnikiem o szerokości 500 i 1400 mm.



Regał naścienny

z możliwością dowolnej regulacji wysokości półek, różne szerokości (głębokość 350 mm).



Otwarte szafki ścienne

Otwarte szafki z jedną półką. O szerokościach 500 mm, 1000 mm i 1200 mm.



Zamykane szafki ścienne

Szafki z drzwiczkami zatrzaskowymi i jedną półką. O szerokościach 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm i 1500 mm.

(Opcjonalnie: zaślepka i oświetlenie)



Podstawa

Do przechowywania basenów w szafkach ściennych w pozycji pionowej.




Zamykane drzwiczki szafy

Chronią przed niepożądanym dostępem.



Pojemnik na odpadki

Ze stali szlachetnej, zamykany, wbudowany w szafkę dolną, wygodny, do drobnych odpadów.

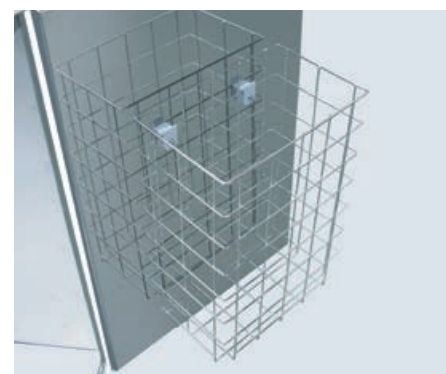

Uchwyt do worka na odpady (26 litrów)

Wbudowany w szafkę dolną, wygodny, do drobnych odpadów.



MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG
Englerstr. 3
77652 Offenburg
Germany
Tel. +49 (0)781 203-0
Fax +49 (0)781 203-1229
E-Mail: info@meiko.de
www.meiko.de