

TopCut H

Verwandeln Sie Ihr TopLine in einen Aufschneider

TopCut H – die multifunktionale Vorrichtung zum Aufschneiden von Urin- und Sekretbeuteln oder für den Einsatz als Gefäßhalter aller gängigen Pflegegeschirre in MEIKO TopLine. Noch flexibler in Sicherheit, Hygiene und Wirtschaftlichkeit.




TopCut H

Aufschneidevorrichtung und Gefäßhalter für alle gängigen Pflegegeschirre in einem: abwechselnd sicheres, wirtschaftliches Aufschneiden, Entleeren und Desinfizieren von Urin- und Sekretbeuteln und Aufbereiten von Pflegegeschirren.

Top sicher und top wirtschaftlich

Durch den multifunktionalen Universalgefäßhalter **TopCut H** mit integriertem Urin- und Sekretbeutelschneider wird Ihr MEIKO Steckbeckenspüler noch flexibler: entweder für das Reinigen und Desinfizieren von in der Praxis gebräuchlichem Pflegegeschirr oder für das problemlose Aufschneiden, Entleeren und Desinfizieren von Urin- und Sekretbeuteln mit dünnflüssigem Inhalt. Dies geschieht unter Verschluss und ist somit nicht nur absolut hygienisch und sicher für Personal und Patienten, sondern reduziert zugleich erheblich das Müllvolumen und verringert damit die Abfallgebühren.

- Verringerung des Müllvolumens
- Reduzierung der Abfallgebühren
- Zuverlässiges Aufschneiden
- Sicherheit für Personal und Patienten durch Aufschneiden im geschlossenen System
- Desinfektion im Gerät
- Effektiver Schnittschutz
- Pflegegeschirre und Urinbeutel können in einem Halter entleert, gereinigt und desinfiziert werden

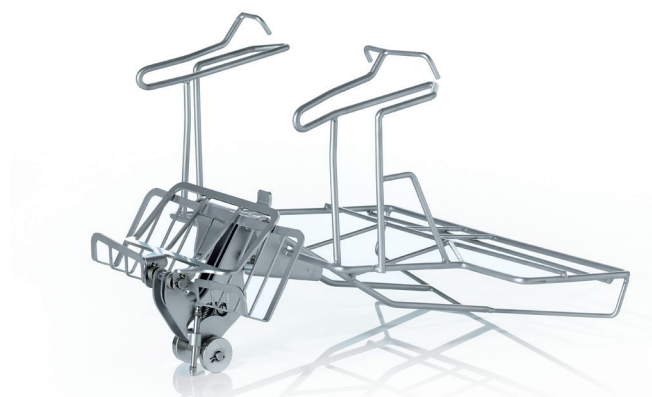


Der **TopCut H** als Gefäßhalter

Der **TopCut H** als Aufschneidevorrichtung



Der **TopCut H** ist konzipiert für alle gängigen Pflegegeschirre und viele Beuteltypen

Weniger Abfallgebühren
durch Reduzierung des Müllvolumens

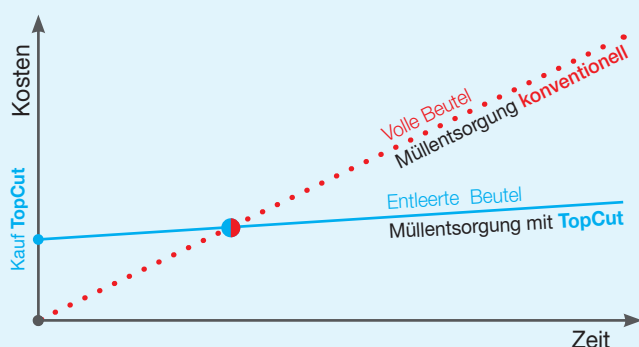

Einfach top in der Praxis

TopCut H überzeugt im Praxisbetrieb durch einfache und zuverlässige Handhabung.

- Einfaches und schnelles Einsetzen der Beutel
- Das Messer fährt erst aus, wenn die Tür fast geschlossen ist, und sorgt somit für ein hygienisch sicheres Aufschneiden
- Das Messer geht beim Öffnen der Waschkammertür automatisch in die geschützte Ausgangsposition zurück
- Auf Anfrage viele weitere Beuteltypen einsetzbar